

**GETINGE FD1800  
MYJNIA-DEZYNFEKTOR**





## UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ W ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Wysoka wydajność czyszczenia i dezynfekcji oferowana przez myjnię Getinge FD1800 sprawia, że jest ona często wybierana jako myjnia-dezynfektor w szpitalach oraz w domach pomocy społecznej na całym świecie, gdzie działa niezawodnie i skutecznie w pomieszczeniach brudowników.

Myjnia Getinge FD1800 nie tylko zapewnia skuteczne i tanie czyszczenie oraz dezynfekcję pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, ale oferuje także dodatkowe opcje i funkcje, takie jak drzwi aktywowane czujnikiem, które zapewniają jeszcze lepsze efekty procedur zwalczania zakażeń szpitalnych.

Urządzenie Getinge FD1800 jest ładowaną od przodu myjnią-dezynfektorem, która świetnie sprawuje się podczas opróżniania, czyszczenia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia basenów szpitalnych, butelek na mocz i wiader. Para doprowadzana za pomocą zamontowanych w komorze dysz stałych i obrotowych zapewnia efektywność spełniającą rygorystyczne wymagania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji określone w normie europejskiej EN ISO 15883.

Myjnia Getinge FD1800 to zmodernizowana zgodnie z polityką firmy Getinge dotyczącą ciągłego poprawiania jakości produktów i usług myjnia Getinge 2000. W efekcie powstało urządzenie oferujące nowe opcje i możliwości, przez co może ono odgrywać jeszcze większą rolę w danej placówce. Procesy w myjni Getinge FD1800 są monitorowane i kontrolowane, dzięki czemu poprawiają się warunki pracy, zwiększa się skuteczność dezynfekcji umożliwiającej zabicie nawet najbardziej odpornych mikroorganizmów.

## WIĘKSZY WYBÓR TO...

Myjnia Getinge FD1800 jest dostępna w wielu modelach i wersjach materiałowych, dzięki czemu łatwo dopasować ją do potrzeb każdego pomieszczenia brudownika. Skuteczność i kontrola procesów zostały wzbogacone o najnowocześniejsze funkcje i opcje, przy czym zachowano niski koszt oraz niewielki wpływ na środowisko.



### Elastyczność konstrukcyjna

Nowa obudowa standardowo wykonana jest z kolorowego polimeru i charakteryzuje się atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem. Komora w każdym modelu wykonana jest ze stali nierdzewnej. Na życzenie obudowa myjni Getinge FD1800 jest również dostępna w wykonaniu ze stali nierdzewnej.




### Wentylator suszarki w standardzie

Pojemniki są błyskawicznie suszone i chłodzone w najbardziej higieniczny sposób przy użyciu powietrza filtrowanego przez filtr HEPA (H13). Po zakończeniu cyklu pojemniki są suche i chłodne, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników oraz poprawia jakość środowiska pracy.



### Funkcja drzwi automatycznych

W celu dopasowania do wymogów higienicznego postępowania bezdotykowego, w myjni Getinge FD1800 dostępne są opcjonalnie drzwi automatyczne, aktywowane czujnikiem podczerwieni. Można też wybrać dodatkowo pedał, który zwiększa możliwości funkcjonalne drzwi automatycznych.

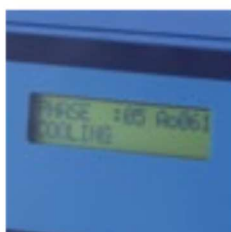

### Kontrola i ustawianie wartości $A_0$

Wartość  $A_0$  można ustawić na 60 lub 600, aby zwalczać nawet najbardziej odporne mikroorganizmy. Faza dezynfekcji może być kontrolowana za pomocą temperatury lub wybranej wartości  $A_0$ , co pozwala jeszcze bardziej skrócić czas trwania cyklu.



## ...WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ



### **Wyświetlanie czasu postępu procesu**

Na wyświetlaczu jest przedstawiany postęp procesu wyrażony w interwałach dziesięciosekundowych, dzięki czemu pracownicy mogą sprawdzać przebieg cyklu. Umożliwia to efektywniejsze planowanie organizacji pracy w wyniku skrócenia czasu oczekiwania na zakończenie procesu.

### **Rejestracja procesu**

Wiele placówek służby zdrowia podąża w kierunku większej przejrzystości operacji dezynfekcji przez stosowanie systemów rejestracji. Dzięki systemowi kontrolnemu PACS 350 myjnia Getinge FD1800 oferuje opcję rejestrowania i śledzenia przebiegu procesów za pośrednictwem drukarki lub urządzenia podłączonego przez port USB.

### **Użytkowanie przyjazne dla środowiska**

Wyjątkowo niskie zużycie wody, energii i środków chemicznych zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne i pozwala utrzymać jak najniższe koszty eksploatacji. Ponadto niska emisja ciepła i niewielki poziom hałasu przyczyniają się do poprawy środowiska pracy.

### **Opcjonalna klasyfikacja IPX4**

W związku z rosnącą świadomością w zakresie kontroli zakażeń na oddziałach szpitalnych na całym świecie, wiele sal pacjentów wymaga zainstalowania myjni-dezynfektora w przyległej łazience. W celu zapewnienia bezpiecznej instalacji w wilgotnym pomieszczeniu zalecana jest klasyfikacja IPX4.

### **Dezynfekcja orurowania**

Z błyskawicznej dezynfekcji za pośrednictwem dysz stałych i obrotowych wynika jeszcze jedna zaleta — cały system przewodów i dysz jest dezynfekowany w każdym cyklu, eliminując ryzyko zakażenia.



## TWORZENIE KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA

Myjnia Getinge FD1800 odgrywa kluczową rolę w prawidłowo zaprojektowanym pomieszczeniu brudownika, ale jest zaledwie jednym z elementów systemu walki z zakażeniami. Firma Getinge oferuje pomoc w zakresie tworzenia optymalnych pomieszczeń brudowników oraz opracowywania ogólnej strategii walki z zakażeniami.

Po wybraniu myjni-dezynfektora ogólny schemat utworzenia kompleksowego rozwiązania można sprowadzić do następujących trzech kroków:

### KROK 1. Wybór odpowiedniego uchwytu

Uchwyt uniwersalny pasuje do większości najczęściej używanych pojemników. Dostępnych jest również szereg uchwytów przeznaczonych do innych rodzajów przedmiotów. Uchwyty te mogą być stosowane dla różnorodnych basenów szpitalnych, a także większości wiader i butelek na mocz. Optymalną wydajność może zapewnić jedynie wybór optymalnego uchwytu z szerokiej, dostosowanej do wielu potrzeb oferty firmy Getinge.



Butelka na mocz i basen przyłóżkowy z pokrywą

### KROK 2. Dodawanie akcesoriów

Firma Getinge oferuje również szereg istotnych akcesoriów, takich jak unikalny, anatomiczny basen szpitalny z pokrywą. Oferowane przez firmę Getinge środki chemiczne, wyjątkowy środek płuczący i odkamieniający oraz niezwykle skuteczny detergent spełnią nawet najbardziej rygorystyczne wymagania użytkowe.



Trzy butelki na mocz

### KROK 3. Opracowanie kompletnego pomieszczenia brudownika

Firma Getinge bierze pod uwagę każdy aspekt pomieszczenia brudownika i oferuje różnorodne wsparcie, od szkolenia w zakresie dobrych praktyk higienicznych, aż po doradztwo w zakresie układu pomieszczenia i wyboru sprzętu. Firma Getinge oferuje również kompleksową koncepcję umeblowania pomieszczenia brudownika, która pozwala klientowi uzyskać higieniczne i bezpieczne środowisko pracy.



Detergenty Getinge Clean zostały opracowane, przebadane oraz zatwierdzone do stosowania m.in. w myjniach dezynfektorach Getinge przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na wydaliny i wydzieliny ludzkie.



Linia Getinge Clean flusher

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE



Modele wolnostojące myjni Getinge FD1800  
wykonane ze stali nierdzewnej lub polimeru

### Modele wolnostojące myjni Getinge FD1800

Masa	100 kg
Szerokość	450 mm
Głębokość	580 mm
Wysokość	1320 mm
Odptyw ścienny/podłogowy ścienny/podłogowy	Ø 110 mm Ø 90 mm
Zużycie prądu	0,16 kWh/cykl
Maks. temperatura otoczenia	40°C
Poziom hałasu	53 dB (A) zgodnie z normą EN ISO 3747:2000
Doprowadzenie wody – woda zimna i ciepła	
Woda	15 mm
Ciśnienie	1–8 barów (14–116 PSI)
Szybkość przepływu	>0,3 l/s
Zużycie wody	Program ekonomiczny 11 litrów/cykl ±10% Program normalny 18 litrów/cykl ±10% Program intensywny 25 litrów/cykl ±10%
Normy	MDD 93/42/EWG. Certyfikat akredytowanej jednostki na zgodność z EN ISO 15883-1 i 15883-3

Wymiary i dane techniczne szafek pasujących do myjni Getinge FD1800 są dostępne na życzenie.



Getinge Infection Control to światowy lider dostarczający systemy sterylizacji dla służby zdrowia. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa przy najniższym koszcie całkowitym. Oferujemy kompletne rozwiązania gwarantujące płynną pracę, zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń i jednocześnie pomagające zwiększyć wydajność.

**Getinge Poland sp. z o.o.**

ul. Osmańska 14,  
PL-02-823 Warszawa  
POLSKA  
Telefon: +48 22 882 06 26  
Fax: +48 22 882 24 52  
E-mail: [getingepl@getinge.com](mailto:getingepl@getinge.com)

**Autoryzowany dystrybutor:**

**GETINGE**  
GETINGE GROUP

[getinge.com](http://getinge.com)

GETINGE GROUP to wiodący, światowy dostawca produktów i systemów zapewniających poprawę jakości i efektywności ekonomicznej w służbie zdrowia i branżach pokrewnych. Działamy posługując się trzema markami: ArjoHuntleigh, GETINGE i MAQUET. **ArjoHuntleigh** oferuje rozwiązania w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i stanach z tym związanych oraz leczenia ran. **GETINGE** dostarcza rozwiązania w zakresie systemów sterylizacji wymaganych w służbie zdrowia i dezynfekcji w branżach pokrewnych. **MAQUET** specjalizuje się w rozwiązaniach, metodach leczenia a także produktach dla bloków operacyjnych i oddziałów intensywnej opieki medycznej.